

Informácia pre používateľa – prečítajte si pozorne!

**DOLOR**git  
med

# Ušný sprej proti bolesti

Zmierňuje bolesť, začervenanie a svrbenie  
Pri zápaloch vonkajšieho zvukovodu



**SK | Prečítajte si pozorne túto informáciu pre používateľa, obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Výdaj tejto zdravotníckej pomôcky nie je viazaný na lekársky predpis.

Pre dosiahnutie čo najlepšieho účinku dodržiavajte odporúčaný spôsob použitia.

**Zloženie:** Glycerín (99,5 %), pantenol, cetylpyridiniumchlorid, voda.

**Aplikačná forma a obsah:** 20 ml sprej. Nenatlakovaná fľaša s dávkovacou pumpičkou.

**Oblasť použitia:** Na fyzikálne ošetrenie a zmiernenie ťažkosti vonkajšieho zvukovodu (napr. Otitis externa).

**Upozornenie:** Ošetrované ťažkosti môžu byť spôsobené rôznymi príčinami. Ak po 2 dňoch nepocítite zlepšenie, je potrebné navštíviť lekára.

**Kontraindikácie:** Ušný sprej sa nesmie použiť pri známej precitlivenosti na glycerín, pri poranení bubienka (perforácii) alebo pri otvorených ranách. Nepoužívajte ušný sprej súčasne s inými lokálne pôsobiacimi liekmi (ušnými kvapkami alebo masťami).

**Interakcie s inými prípravkami:** Doteraz nie sú známe.

**Vedľajšie účinky:**

Doteraz nie sú známe.

**Bezpečnostné opatrenia a zvláštne upozornenia:**

- Pri silných bolestiach ucha musíte v každom prípade vyhľadať lekára.
- Ak sa ťažkosti po 2 dňoch nezlepšia, dokonca sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára.

**Na čo musíte dbať pri použití u detí?**

Použiteľné pre deti od veku 3 rokov.

Pre použitie u detí je všeobecne potrebné vopred sa poradiť s lekárom.

**Na čo musíte dbať počas gravidity a v období dojčenia?**


Nie sú známe žiadne poznatky, ktoré by zabraňovali použitiu prípravku počas tehotenstva a v období dojčenia. Napriek tomu sa odporúča pred použitím poradiť sa s lekárom.

**Dávkovanie, spôsob a dĺžka použitia:**

- Hlavu držte vzpriamene, podržte sprejovú hlavicu pred vstupom do zvukovodu a vstreknite 1 až 2 krát.
- Pre lepšiu účinnosť ucho niekoľko sekúnd masírujte.
- Roztok nechajte niekoľko sekúnd pôsobiť. Potom nahnite hlavu a voľne vytekajúcu tekutinu s nečistotami jemne odstráňte čistým obrúskom a ucho osušte.
- Po každom použití prednú časť sprejovej hlavice vyberte, opláchnite teplou vodou a osušte.
- Používajte podľa potreby najviac 4 krát denne.

Ušný sprej sa môže používať aj preventívne.

**Doba použiteľnosti:**

Po uplynutí dátumu trvanlivosti , ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na etikeťe, sa ušný sprej nesmie používať.

Po otvorení spotrebujte do 6 týždňov.

**Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.**


 Pri skladovaní neprekročiť teplotu 25 °C.

**Stav informácie:** September 2019.

**Zdravotnícka pomôcka**



ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

<b>Kunde:</b>	Dr. Theiss Naturwaren GmbH
<b>Projekt:</b>	DGiet_BPZ_OhrSchmSpr_020_CZSK-
<b>Druckerzeugnis:</b>	Beipackzettel
<b>Kontur:</b>	-
<b>Dokumentformat:</b>	130 x 186 mm
<b>Auftr.-Nr.:</b>	0621064
<b>EAN:</b>	-
<b>Art.-Nr.:</b>	00722931
<b>Fertigw.-Nr.:</b>	651155/0
<b>Druckfarben:</b>	

**Achtung!** Bitte prüfen Sie die Daten eingehend und umfassend auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Für nicht beanstandete Mängel, die nach erteilter Freigabe festgestellt werden, kann die Hartmann Designagentur GmbH keine Haftung übernehmen. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen. Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zum vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.

<b>Datum:</b>	-
<b>Reinzeichnung:</b>	-
<b>Versand an:</b>	-
<b>Best.-Nr.:</b>	-



**hd.** hartmann  
designagentur  
T +49 (0)6371 52848

INFORMATIONEN ZUR SCHRIFT

**Druckerei:** bitte in Ihre Daten übernehmen

**VORGABE:** Schriftgrad minimal

**ABMESSUNG GRUNDSCHRIFT**  
Frutiger Next LT W1G 7,6 pt / 8,5 pt

Frutiger Next LT W1G  
X  1,4 mm X  3 mm


**VERWENDET:** Schrift / Schriftgrad / Zeilenabstand


**Schriften:** Frutiger Next LT W1G -  
Condensed Regular, Bold

**Kleinste Schriftgröße:** 9 pt

**Schriftgröße Fließtext:** 9 pt

**Zeilenabstand:** 3,4 mm / 9,5 pt

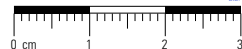

 **Výrobca:** Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg  
**Distributér:** DR THEISS SK s.r.o., Nádražná 1665/34, 90028 Ivanka pri Dunaji

Návod k použití – čtěte prosím pozorně!

**DOLOR**git  
med

## Ušní sprej proti bolesti

Zmírňuje bolest, zarudnutí a svědění.  
Při zánětu vnějšího zvukovodu.



**CZ | Přečtěte si pozorně celý návod k použití, protože obsahuje pro vás důležité informace. Tento zdravotnický prostředek není vázáný na lékařský předpis. Pro dosažení nejlepšího možného výsledku ošetření je však nutné používat ušní sprej podle pokynů.**

### **Složení:**

Glycerin (99,5 %), panthenol, cetylpyridinium-chlorid, voda.

### **Forma podání a obsah:**

20 ml sprej. Netlaková lahvička s dávkovací pumpičkou.

### **Oblasti použití:**

K fyzickému ošetření a zmírnění obtíží vnějšího zvukovodu (např. Otitis externa).

### **Upozornění:**

Obtíže, které je nutné ošetřit, mohou mít různé příčiny. Pokud po 2 dnech nedojde ke zlepšení, je nutné se poradit s lékařem.

### **Kontraindikace:**

Ušní sprej se nesmí používat v případě známé přecitlivělosti na glycerin a v případě poranění ušního bubínku (perforace ušního bubínku) nebo otevřených ran. Nepoužívejte prosím ušní sprej současně s jinými lokálně působícími léky (např. ušními kapkami a mastmi).

### **Interakce s jinými prostředky:**

Dosud nejsou známy.

### **Nežádoucí účinky:**

Dosud nejsou známy.

### **Bezpečnostní opatření a zvláštní upozornění:**

- V případě silné bolesti v uchu by měl být v každém případě vyhledán lékař.
- Pokud se obtíže do 2 dnů nezlepší nebo dojde dokonce ke zhoršení, pak je nutné vyhledat lékaře.

### **Na co musíte dbát při používání u dětí?**

Použitelné pro děti od 3 let. Obecně je nutné se poradit s lékařem před použitím u dětí.

### **Na co musíte dbát během těhotenství a kojení?**

Nejsou k dispozici poznatky, které by hovořily proti použití přípravku během těhotenství a kojení. Před použitím se však přesto doporučuje poradit se s lékařem.

### **Pokyny pro dávkování a způsob aplikace:**

- Držte hlavu rovně, lahvičku s rozprašovačem přidrže před vstupem do zvukovodu a aplikujte 1 až 2 vstřiky.
- Pro lepší účinnost masírujte ucho několik vteřin.
- Nechte roztok několik vteřin působit. Poté nakloňte hlavu na stranu a čistým ubrouskem otřete vytékající kapalinu s nečistotami a ucho osušte.
- Po každém použití sundejte nástavec hlavy rozprašovače, opláchněte teplou vodou a osušte. Používejte podle potřeby až 4x denně.

Ušní sprej lze používat rovněž preventivně.

### **Upozornění na dobu použitelnosti:**

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a etiketě. Použitelné 6 týdnů po otevření.

### **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

 Uchovávejte při teplotě do 25°C.

### **Stav informace:**

Září 2019

**Zdravotnický prostředek**



651155/0 0072931

 **Výrobce:** Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstrasse 10, D-66424 Homburg  
**Distributor:** DR. THEISS CZ s.r.o., Česká republika