

Návod k použití – prosím pozorně ho přečtěte!

Vizik

Oční kapky Alergie s hyaluronátem sodným 0,15 % a ectoinem 2 %

CZ | **Pozorně si přečtěte celý příbalový leták. Obsahuje důležité informace. Ushovejte si prosím příbalový leták. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pokud potřebujete více informací, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.**

Oční kapky Vizik Alergie obsahují přírodní a klinicky ověřené složky, jejichž účinnost je vědecky prokázána. Oční kapky obsahují hyaluronát sodný, sodnou sůl kyseliny hyaluronové, která díky své specifické fyzikální vlastnosti vytváří rovnoměrný, stabilní a na rohovce velmi dlouhou ulpívající ochranný film, aniž by došlo ke zhoršení vidění, a ectoin – přirozenou molekulu ochrany buněk působící na zklidnění podráždění a stabilizaci membrány, která váže vlhkost a stabilizuje lipidovou vrstvu slzného filmu. Izotonické oční kapky zvlhčují svědící, zarudlé oči a tvoří tak účinný ochranný komplex proti škodlivým vlivům, jako jsou např. alergie.

Kombinace hyaluronátu sodného (stabilizujícího slzný film) a ectoinu (zvlhčujícího, zklidňujícího) chrání před alergeny z okolního vzduchu, zvlhčuje povrch oka a činí jej kluzkým. To poskytuje dlouhodobou úlevu a podporuje regenerační proces podrážděné a citlivé spojivky v případech potíží v souvislosti s:


- alergenů (např. pyl, prach nebo zvířecí srst). Zmírňuje tím způsobené podráždění očí.
- stresujícími vlivy okolního prostředí, např. klimatizací, větrem, chladem, suchem, znečištěným ovzduším, např. cigaretovým kouřem,
- mechanickým namáháním, např. při nošení tvrdých nebo měkkých kontaktních čoček nebo při diagnostických zákrocích na oku,
- namáháním očí, např. při práci s obrazovkou počítače, s mikroskopem nebo při dlouhých cestách autem.

Díky tomu, že **oční kapky Vizik Alergie** neobsahují konzervační látky, jsou obzvláště dobře snášeny i při dlouhodobém používání.

Použití: Lahvičku otevřete odstraněním bezpečnostního kroužku tahem za prefabrikovaný jazýček, až do jeho úplného odtržení (1). Poté sejměte víčko vytažením nahoru (2). Mírně zakloňte hlavu, podívejte se nahoru a jemně odtáhněte spodní víčko od oka. Držte lahvičku otvorem kapátka dolů a silnějším a déle trvajícím tlakem vkápněte 3-5krát denně jednu kapku do spojivkového vaku oka (3 + 4).

Pomalou zavřete oči, aby se tekutina mohla rovnoměrně rozprostít po povrchu oka.

Zamezte jakémukoli kontaktu očí nebo rukou s otvorem kapátka. Případnou kapku, která ještě zůstane v otvoru kapátka, odstraňte jemným poklepnutím na dno lahvičky. Poté mírným tlakem nasadte víčko zpět na lahvičku (5). Pokud by se obtíže zhoršily nebo by nenastalo zlepšení, obraťte se na svého očního lékaře.

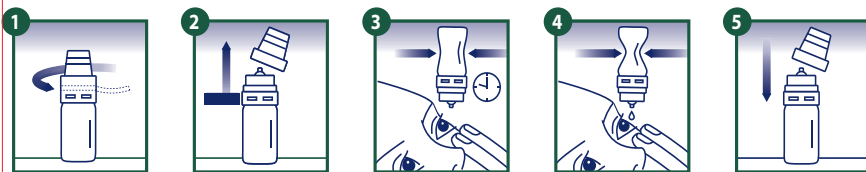

Speciální, sterilní systém vzduchového filtru lahvičky způsobuje, že po každém odebrání kapky musí uplynout několik vteřin čekání bez tlaku na lahvičku, aby mohlo opět dovnitř vproudit dostatečné množství vzduchu. Bez tohoto posečkání je další kápnutí jen stěží možné. Navíc s postupným vyprazdňováním lahvičky je nutné vyvinout z fyzikálních důvodů trochu větší tlak.

Složení: 1 ml obsahuje: hyaluronát sodný 0,15 %, ectoin 2 %, chlorid sodný, citrónan sodný, kyselina citronová, injekční voda

Velikost balení: 1 x 10 ml

Bezpečnostní opatření a upozornění:

- Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička nebo bezpečnostní kroužek poškozený.
- Nedotýkejte se oka otvorem kapátka lahvičky.
- Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.
- Ve velmi vzácných případech může použití očních kapek u velmi citlivých očí způsobit podráždění.
- Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je před použitím a znovu je nasadte až 15 minut po použití kapek.
- Pokud používáte také jiné oční kapky/masti, je třeba dodržet odstup mezi aplikacemi 15 minut. **Oční kapky Vizik Alergie** by pak měly být aplikovány vždy jako poslední.
- Nepoužívejte na infikované nebo poraněné oči.
- Po použití může být dočasně snížena zraková ostrost; v takovém případě neřidte automobil ani neobsluhujte stroje a vyčkejte, dokud se neobnoví normální zraková ostrost.
- **Oční kapky Vizik Alergie** nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Tento údaj je vyražen na štítku i na krabici.
- Nepoužívejte přípravek déle než 12 měsíců od prvního otevření lahvičky.
- Díky speciálnímu, inovačnímu systému sterilního filtru kapátka nelze odebrat celé množství roztoku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladování: Uchovávejte při 2 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Po použití lahvičku znovu uzavřete víčkem. Uchovávejte lahvičku v originální krabici, aby byla chráněna před světlem.

Popis a způsob použití viz příložený Příbalový leták.

Teplota skladování mezi 2 °C až 25 °C. Nepoužívat pokud je lahvička nebo bezpečnostní kroužek poškozený

Číslo šarže a „a„ Použitelné do“ je vtištěno na štítku a na krabici

STERILE A aseptické zpracování

CE 0483

Výrobce: Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln, Německo

Dovozce: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Německo

Stav informace: 12/2021

ANSICHTS-PDF – KEINE DRUCKDATEN

Kunde: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Projekt: Viz_BPZ_AuTrop_Alle_010_CZSK-

Druckerzeugnis: Beipackzettel
Kontur: BPZ_135_420_Laetus.eps
Dokumentformat: 135 x 420 mm

Aufr.-Nr.: 0222181

EAN: -
Art.-Nr.: 00-
Fertigw.-Nr.: 651161/0

KONTUR

Druckfarben:
PANTONE 2758 C
PANTONE 554 C

Achtung! Bitte prüfen Sie die Daten eingehend und umfassend auf Vollständigkeit, Richtigkeit und auf alle gesetzlichen Anforderungen, die an die Kennzeichnung des jeweiligen Produktes gestellt werden. Für nicht beanstandete Mängel, die nach erteilter Freigabe festgestellt werden, kann die Hartmann Designagentur GmbH keine Haftung übernehmen. Dem Hersteller obliegt es, die Daten auf die Anforderungen der erforderlichen Drucktechnik anzupassen. Diese Vorlage und alle darin enthaltenen Elemente unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck für das vorstehend bezeichnete Produkt verwendet werden. Eine Nutzung über diesen Zweck hinaus ist rechtlich unzulässig.

Datum: -
Reinzeichnung: -
Versand an: -
Best.-Nr.: -

hartmann
designagentur
T +49 (0)6371 52848

INFORMATIONEN ZUR SCHRIFT

VORGABE: Schriftgrad minimal ? pt

VERWENDET
Schriftgrad minimal x pt
Schriftgrad Fließtext x pt



read direction
Code

75 mm from the midpoint

651161/0 XXXXXXXX

Informácia pre používateľa – starostlivo si prečítajte!

Vizik

očné kvapky pri alergii s hyalurónanom sodným 0,15 % a ektoínom 2 %

SK | Starostlivo si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a uchovajte si ju. Obsahuje pre Vás dôležité informácie. Táto zdravotnícka pomôcka je dostupná bez lekárskeho predpisu. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na lekára alebo lekárničku.

Vizik očné kvapky pri alergii obsahujú prirodzené a klinicky overené obsahové látky, ktorých účinnosť je vedecky potvrdená. Očné kvapky obsahujú hyalurónan sodný, sodnú soľ kyseliny hyalurónovej, ktorá vytvára na základe svojej špecifickej fyzikálnej vlastnosti rovnomerný, stabilný ochranný film, ktorý obzvlášť dlho lpie na rohovke oka, bez toho, aby ovplyvňoval videnie a ektoín, prirodzenú ochrannú molekulu, ktorá zmierňuje podráždenie a má stabilizačné vlastnosti na membrány, vďaka vlhkosti a okrem toho aj stabilizuje lipidovú vrstvu slzného filmu. Izotonické očné kvapky zvlhčujú svrbiace, začervenané oči a tvoria tak účinný ochranný komplex pred škodlivým vplyvom prostredia ako napríklad pred alergénmi.

Kombinácia hyalurónanu sodného (stabilizuje slzný film) a ektoínu (zvlhčujúci, upokojujúci) chráni pred alergénmi z okolitého prostredia, zvlhčuje povrch oka a vyhladzuje ho. Tým umožňuje dlhodobú úľavu a podporuje regeneračné procesy na podráždenej a citlivej sliznici oka pri ťažkostiach v súvislosti s:


- alergénmi (napr. peľ, prach a zvieracia srst), zmierňuje tým vznikajúce podráždenie oka;
- vplyvom životného prostredia, napr. klimatizácia, vietor, chlad, suchý vzduch, znečistenie vzduchu cigaretovým dymom;
- mechanickou námahou, napr. pri nosení tvrdých alebo mäkkých kontaktných šošoviek alebo pri diagnostických zásahoch do oka;
- pri namáhaných očiach, napr. pri práci s počítačom, mikroskopom alebo aj pri dlhej jazde autom.

Vzhľadom na to, že **Vizik očné kvapky pri alergii** neobsahujú konzervačné látky, sú veľmi dobre tolerované aj pri dlhodobom používaní.

Použitie: Pred otvorením odstráňte bezpečnostný prúžok z vrchnáka potiahnutím, až kým nie je odstránený (1). Potom zdvihnite vrchnák potiahnutím nahor (2). Zakloňte hlavu, pozrite sa nahor, zľahka odhrňte spodné viečko. Držte fľašu otvorom nadol a silným dlhým tlakom aplikujete do spojkového vaku 3 - 5 krát denne 1 kvapku (3+4).

Pomaly zatvorte oči, aby sa kvapky rovnomerne rozptýlili na ich povrchu.

Vyhňte sa akémukoľvek dotyku otvoru kvapkadla s očami alebo rukami. V prípade, že sa na kvapkadle nachádza zvyšná kvapka, odstráňte ju ľahkým poklopaním na dno fľaše. Nasadte vrchnák ľahkým tlakom späť na otvor fľaše (5). Ak sa problémy zhoršia, alebo sa nezlepšia, vyhľadajte očného lekára.

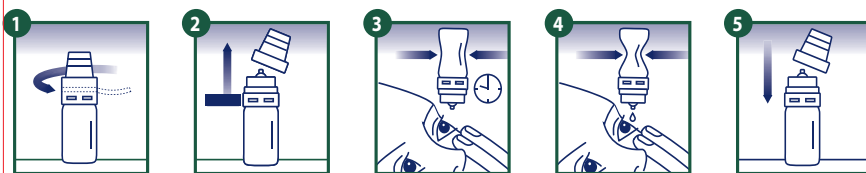

Špeciálny vzduchový filter fľaštičky spôsobuje, že po každej aplikácii musí byť niekoľko sekúnd pauza, aby sa dovnútra dostalo dostatok vzduchu. Bez dodržania pauzy je ďalšie použitie kvapkadla sťažené. Okrem toho je fyzikálne podmienené použitie silnejšieho tlaku pri zvyšujúcom sa vyprázdňovaní fľaštičky.

Zloženie: 1 ml obsahuje: hyalurónan sodný 0,15 %, ektoín 2 %, chlorid sodný, citrát sodný, kyselina citrónová, voda na injekcie.

Veľkosť balenia: predajná jednotka 1x10 ml

Upozornenia a opatrenia:

- Nepoužívať pri poškodenej fľaštičke alebo uzávere.
- Nedotýkať sa oka otvorom fľaštičky.
- Nepoužívať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku.
- Vo veľmi ojedinelých prípadoch môže vzniknúť pri používaní očných kvapiek pri mimoriadne citlivých očiach podráždenie.
- Ak používate kontaktné šošovky, musíte si ich pred aplikáciou kvapiek odstrániť a aplikovať najskôr po 15 minútach.
- Ak používate aj iné očné kvapky/masť, odstup medzi ich použitím má byť najmenej 15 minút. **Vizik očné kvapky pri alergii** sa majú použiť ako posledné.
- Nepoužívať pri infekcii alebo poranení oka.
- Po aplikácii môže byť prechodne znížená ostrosť videnia; v tomto prípade neradiť žiadne vozidlá, neobsluhovať stroje a čakať, pokiaľ sa obnoví normálna ostrosť videnia.
- Nepoužívať **Vizik očné kvapky pri alergii** po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je uvedená na etikete a na krabičke.
- Po prvom otvorení nepoužívať dlhšie ako 12 mesiacov.
- Na základe systému sterilného filtra na otvore kvapiek, nemôže byť použitý celý objem kvapiek.
- Uchovávajú mimo dosahu detí.

Uchovávanie: Pri teplote medzi 2 °C a 25 °C chránené pred mrazom. Po použití znovu uzatvorte vrchnákom. Uchovávajú chránené pred svetlom v originálnej krabičke.

Popis a spôsob použitia pozri príbalovú informáciu pre používateľa.

Teplota skladovania medzi 2 °C a 25 °C.

Nepoužívať pri poškodenej fľaštičke alebo uzávere.

Číslo výrobného šarže a použiteľné do sú vyznačené na etikete a krabičke.

STERILE A Aseptická výroba


CE 0483

Výrobca: Penta Arzneimittel GmbH
Werksstraße 3, 92551 Stulln, Nemecko

Distribúcia: Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, 66424 Homburg, Nemecko

Stav informácie: 12/2021

Art.-Nr.: XXXXXXXX

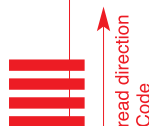

75 mm from the midpoint